


Наборы NTI для лаборантов



Лаборатория

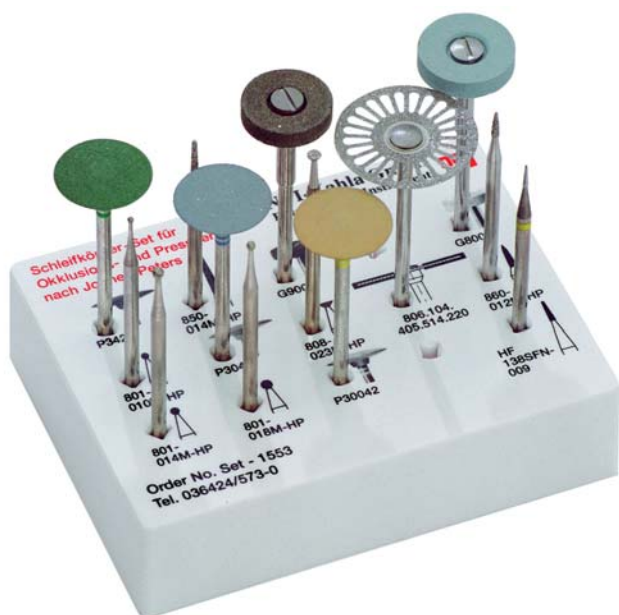

Набор Оливера Брикса
 (Oliver Brix).
 для обработки керамики

Set-1551.1

Set-1551.2



Наборы Йохена Петерса
 (Jochen Peters) для обработки
 драгоценных металлов и керамики

Set-1552

Set-1553



Набор инструментов
 для фрезерного оборудования
 Set 0°

Set-1565




Набор инструментов Дёрнера
 (Dogner) для фрезерного
 оборудования

Set-1566



Набор инструментов
 В. Броша (V. Brosch)
 для эстетических реставраций

Set-1587

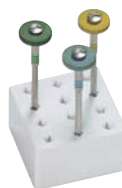

Экспериментальный набор
 NTI CeraGlaze
 для керамики

Set-1575



Набор инструментов
 для гипсовых моделей
 NTI Gips Set

Set-1582



Подставка под инструменты
 для лаборатории

4059








Набор Оливера Брикса (Oliver Brix) для обработки керамики

С помощью набора возможно точное воспроизведение контуров и поверхностей натуральных зубов на любых керамических материалах. Набор состоит из 24 инструментов.

NTI код: Set - 1551

Oliver Brix

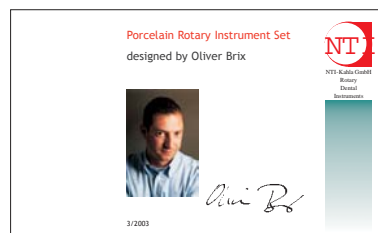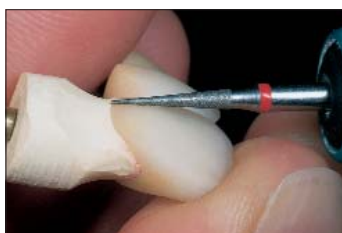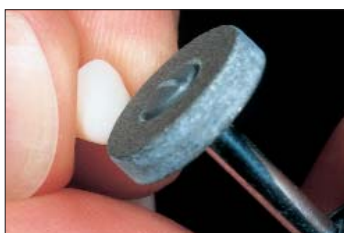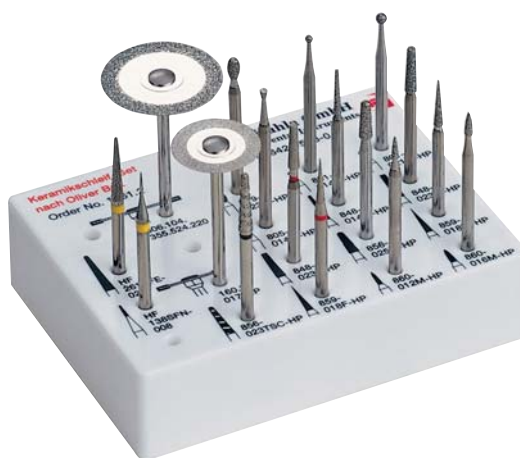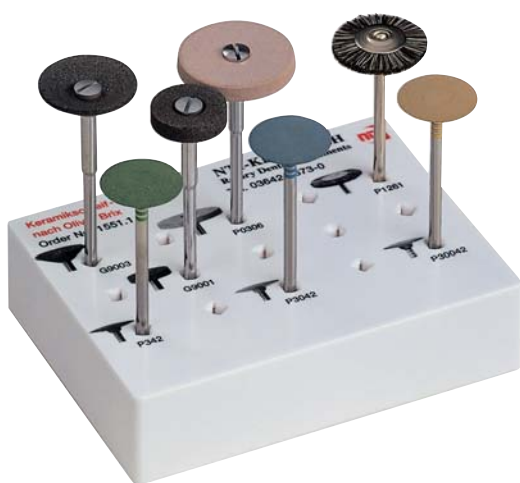


Запросите у регионального дилера снабженный информацией для пользователя и хорошо иллюстрированный каталог.

Набор Йохена Петерса (Jochen Peters) для обработки драгоценных металлов.

Специально подобранные вращающиеся инструменты для эффективной обработки вкладывшей (inlays, onlays), насадок, коронок, мостов.

NTI код: Set - 1552

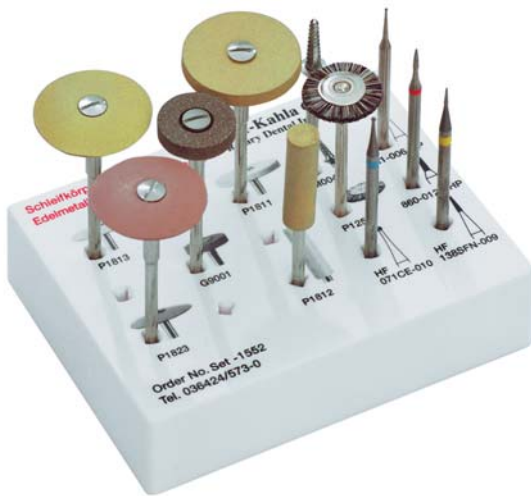


Набор Йохена Петерса (Jochen Peters) для обработки керамики.

Инструменты для эффективной обработки и финирирования керамических облицовок в том числе в боковых областях

NTI код: Set - 1553



Jochen Peters

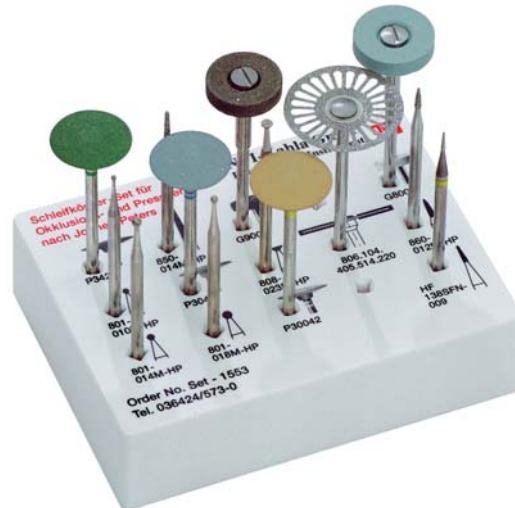

Schleifkörper-Set nach Jochen Peters
Rotary Instrument Sets designed by Jochen Peters

5/2003


Запросите у регионального дилера снабженный информацией для пользователя и хорошо иллюстрированный каталог.

Набор инструментов для фрезерного оборудования **Milling Technique Set 0°**

Корректное использование высокоточных инструментов является необходимым условием изготовления зубных протезов. Важны также правильный выбор нужных инструментов и последовательность их использования

Разработанный компанией **FUNDAMENTAL**, набор инструментов для фрезерного оборудования **Milling Technique Set 0°** призван обеспечить все эти требования и гарантирует систематизацию работы. Набор разработан для современной дентальной лаборатории.

NTI код: **SET-1565**

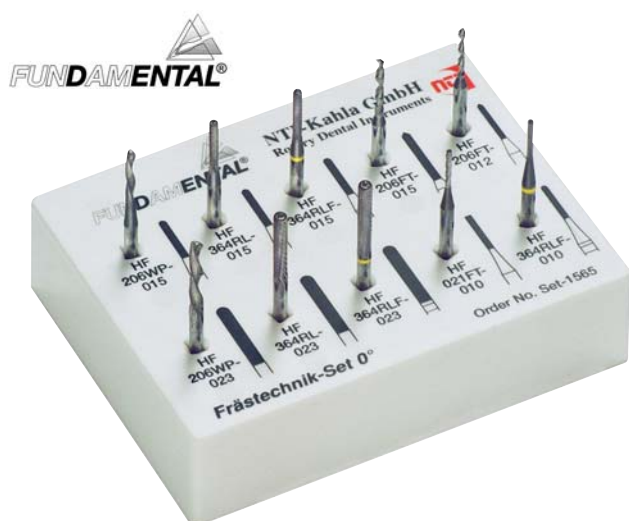

HF206WSP-015



Параллельная фреза для воска
 Parallel Wax Cutter

HF364RL-015



Параллельная фреза, простая насечка, круглая вершина, левосторонняя
 Parallel cutter plain cut round end, left twist

HF364RLF-015



Параллельная фреза, простая насечка со шлифом, левосторонняя, круглая вершина
 Parallel cutter plain cut round end, left twist, flat with chamfer ground section

HF206FT-015



Спиральный бор
 Twist burs

HF206FT-012



Спиральный бор
 Twist burs

HF364WS-023



Параллельная фреза для воска
 Parallel Wax Cutter

HF364RL-023



Параллельная фреза, простая насечка, круглая вершина, левосторонняя
 Parallel cutter plain cut round end, left twist

HF364RLF-023




Параллельная фреза, простая насечка со шлифом, левосторонняя, круглая вершина
 Parallel cutter plain cut round end, left twist, flat with chamfer ground section

HF021FT-010



Фреза для пазов
 Grooving cutter

HF364RLF-010

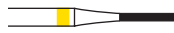

Параллельная фреза, простая насечка со шлифом, левосторонняя, круглая вершина
 Parallel cutter plain cut round end, left twist, flat with chamfer ground section

Набор инструментов для фрезерного оборудования разработанный мастером - техником Дёрнером (Dörner)

NTI код: 1566



- HF364RL-123-010
- HF364RL-123-015
- HF364RL-123-023
- HF364XR-123-010
- HF364XR-123-015
- HF364XR-123-023
- HF364XFR-123-010
- HF364XFR-123-015
- HF364XFR-123-023
- HF206WP-123-010
- HF206WP-123-015
- HF206WP-123-023

- HF206FT-123-015
- HF206FT-123-012
- HF206FT-123-010
- HF206FT-123-007
- HF021FT-123-015
- HF021FT-123-012
- HF021FT-123-010
- HF021FT-123-007
- HF294FT-123-029
- HF294FT-123-027
- HF210FT-123-010
- HF206FT-123-007
- HF210FT-123-007
- HF370FT-123-009


Набор для эстетических реставраций разработанный **Волкером Брошем** (**Volker Brosch**)

Максимальный эстетический результат при обработке керамики может быть достигнут если цвет, форма, а также структура поверхности полностью эмитируют натуральные.

Данный набор разработан для быстрого воспроизведения натуральной структуры

Инструменты подобраны так, чтобы их форма и абразивность способствовали удобной работе и идеальному результату.

NTI код: SET-1587

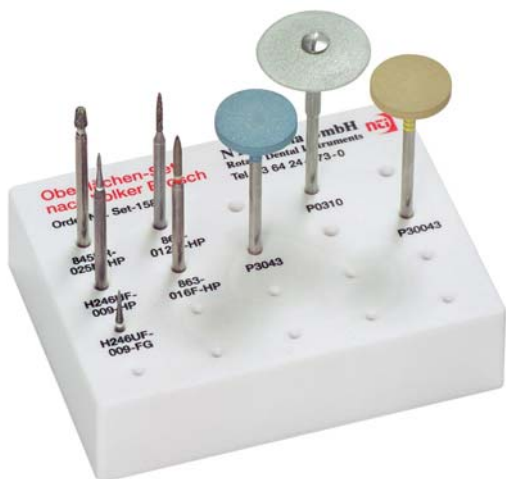

845KR-25M-HP 

863-012M-HP 

 **863-016F-HP** 

 **H246UF-009-FG** 

 **H246UF-009-HP** 

P0310



 **P3043** 

 **P30043** 

Экспериментальный набор **NTI CeraGlaze** для керамики.

Высококачественное алмазное зерно и новый материал связки позволяют добиться оптимальных результатов обработки всех типов керамики. Три степени зернистости обеспечивают индивидуальный выбор нужного инструмента для каждого случая. Полирование до зеркального блеска достигается без применения полировочных паст. Высокая стабильность связки обеспечивает длительный срок службы инструментов.

NTI код: SET-1575



Трехшаговая система для полирования керамики

Шаг 1: Зеленое кольцо
Предварительное полирование.
Крупное зерно.
макс. скорость 15.000 об/мин

Шаг 2: Синее кольцо
Регламентное полирование.
Среднее зерно.
макс. скорость 10.000 об/мин

Шаг 3: Желтое кольцо
Окончательное полирование до зеркального блеска,
без необходимости обжига.
Мелкое зерно.
макс. скорость 5.000 об/мин




Набор инструментов для гипсовых моделей **NTI Gips Set**


Предлагаемый набор инструментов значительно упростит обработку гипса и гипсовых моделей.

Инструменты позволяют придать совершенную форму оттиску и акцентированно показать линию края коронки.

NTI код: SET-1582

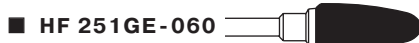

806.104.365.524.450

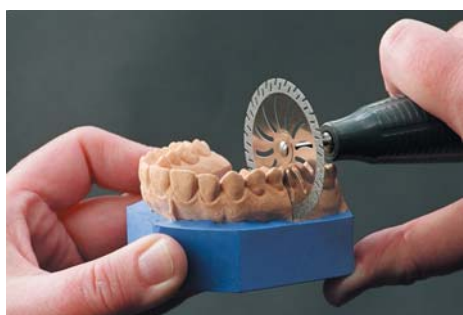

NTI Подставка под инструменты для лаборатории

Блок изготовлен из достаточно нейтрального материала - алюминия и легко чистится.

для простоты удержания инструментов имеется магнитный сегмент

80 отверстий для всех типов вращающихся инструментов:

13 на задней стороне, 12 на намагниченном стенде и 55 в центре.

3 кг - достаточный вес для предупреждения случайного передвижения подставки.

Диаметр 20 см. Удобно и надежно держится в руках благодаря специальным пазам.

При помощи адаптера можно использовать отверстия и под FG инструменты.

Вы сами решите как лучше разместить инструменты на подставке.



NTI код: 4059

Поставляется без инструментов